



4℃
30℃
保管温度
Research Use Only
RORCO 011

い>こきくく>あ

※たべられません

※たべられません

おくちでちえっく! 簡易マニュアル

Step 1	Step 2	Step 3	Step 4	Step 5
キットを袋から取り出します。 ★印の爪を立てます (5カ所)	綿棒を口にくわえ、唾液を含ませます。	綿棒を台紙の枠に沿って乗せます。	台紙の点線に沿ってカバの口を閉じます。裏の指マークの位置で数回押し込み、観察部分に唾液を染み込ませます。	カバの口を開いて綿棒を外します。30～60秒の間に観察部分の色調を標準色調表と比較します。



製造元・お問い合わせ先

セルスペクト株式会社

〒020-0857

岩手県盛岡市北飯岡2丁目4-23 TEL.019-134-6616


観察の見方

pH
酸性度



通常、口の中は中性に保たれていますが、食後は酸性に傾きやすくなります。

オーラル
コンディション
タイプ

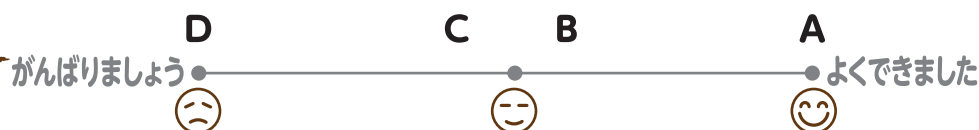

唾液中の成分から、口の中のコンディションを表します。

2026年2月作成(第7版)